

Установка ФармЭксперт

Что нужно сделать перед установкой

1. Сколько компьютеров в аптеке?

- Если 2 и более ПК — на **основном (сервисном)** ПК нужно настроить статический IP.


2. Выключите антивирус на время установки, иначе он может удалить нужные файлы. После установки — добавьте папку программы и её файлы в **исключения** антивируса.

3. При самостоятельной установке запросите у технической поддержки по почте support@infoas.biz актуальный дистрибутив и учетные данные для автоматизации новой торговой точки. Либо оставьте заявку на установку силами технической поддержки.

Установка производится 64-битного приложения. Если ваша ОС не позволяет выполнить данную установку, отправьте в техническую поддержку запрос для настройки возможности работать вашему логину с 32-битным приложением


Что именно вы устанавливаете?

При самостоятельной установке запустите полученный от технической поддержки дистрибутив и следуйте подсказкам в диалоговых окнах. На первом шаге выберите установку **программы Учета**

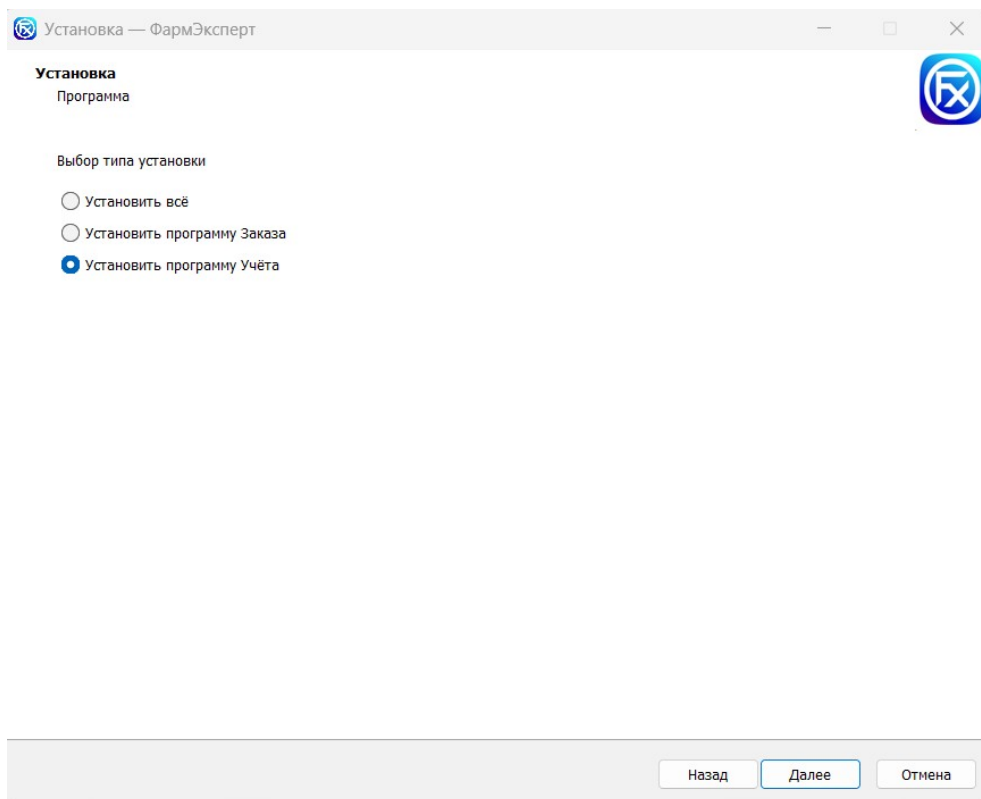

Первый (основной) компьютер в аптеке?

Выбирайте **“Установить сервис”** . Также установщик предложит выбрать битность устанавливаемой программы (выбирайте в соответствии с битностью вашей операционной системы), а также битность устанавливаемой MySQL (выбирайте x64 только, если ваша ОС 64-битная и ОЗУ 8 Гб или более)

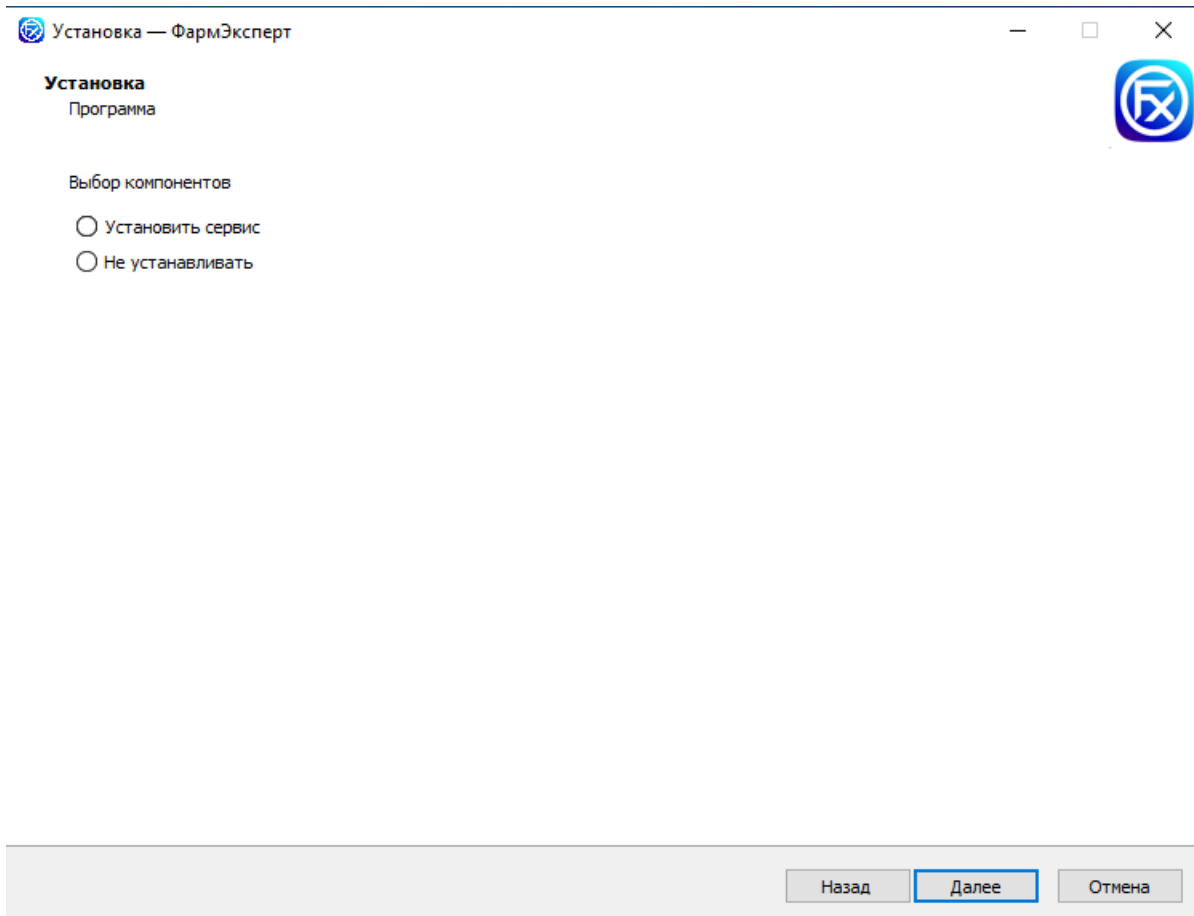

и на следующем шаге заполните нужные поля:

- Номер субъекта учета (СУ) (получен при обращении в техническую поддержку)
- Пароль (получен при обращении в техническую поддержку)
- IP-адрес (проверьте, если несколько сетей. Необходимо указать IP адрес ПК с устанавливаемым сервисом. Если установок дополнительных рабочих мест не будет, то внесите 127.0.0.1)
- Имя FX (без пробелов) для идентификации установки

Установка — ФармЭксперт

Установка
Программа

Данные для работы сервиса:

Субъект учета (пользователь InfoAS):

Пароль InfoAS:

IP адрес компьютера, если определен не верно, введите верный:

Имя FX (без пробелов)

servicePort:

grpcPort:

Порт MySQL:

Назад Далее Отмена

Дополнительный ПК (рабочее место)?

Если установка проходит дополнительного рабочего места, то на первом шаге выбирайте установку **без сервиса** и на следующем шаге заполните нужные поля:

- IP-адрес сервисного ПК
- Имя FX (без пробелов) для идентификации установки



Установка — ФармЭксперт



Установка

Программа



Данные для работы сервиса:

IP адрес компьютера, если определен не верно, введите верный:

192.168.1.146

Имя FX (без пробелов)


127.0.0.1

Назад

Далее

Отмена

- Укажите папку установки.

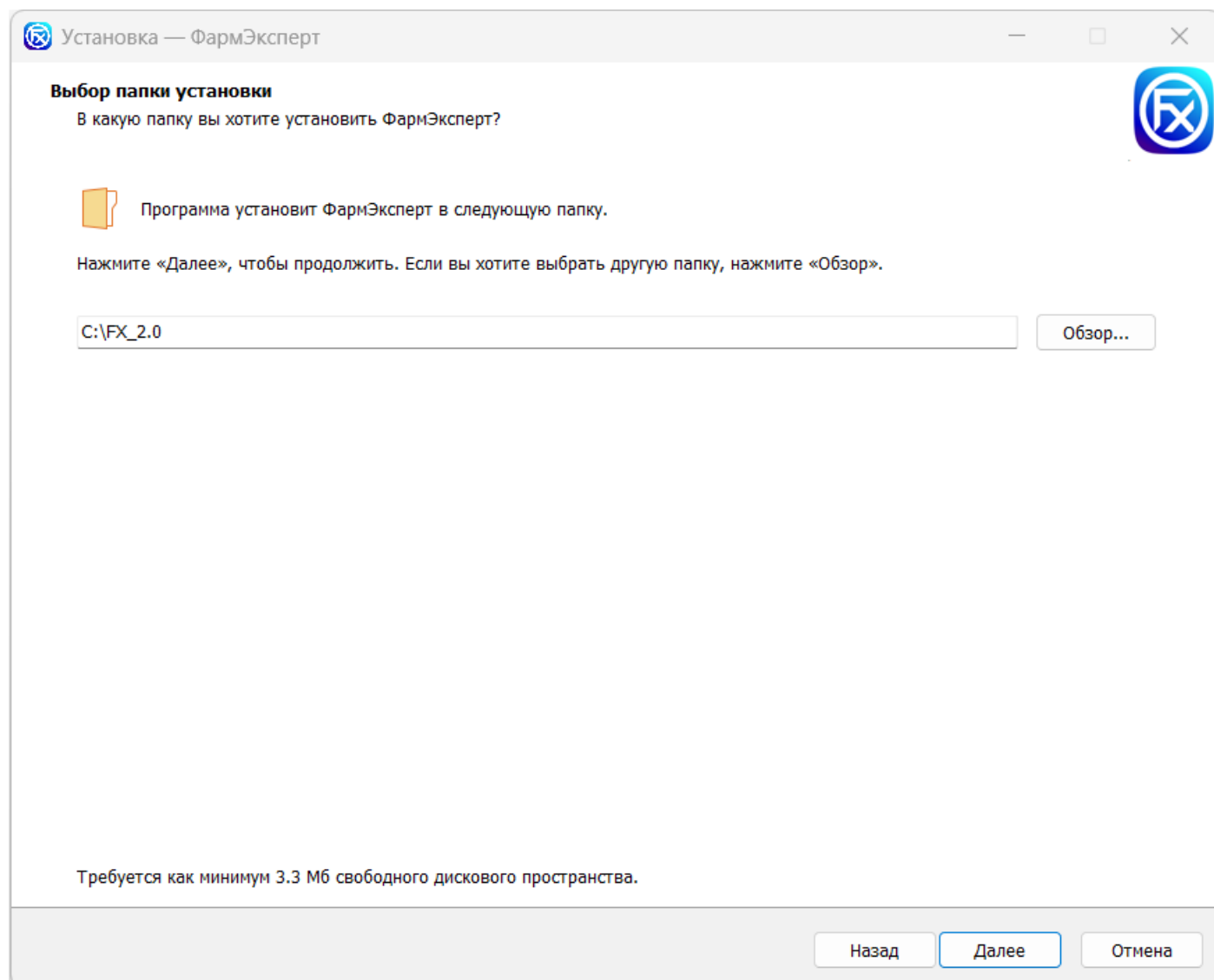

- В конце нажмите "**Завершить**" — это обязательно, без этого программа может работать некорректно.

Требования к компьютеру

Для сервиса (основной ПК):

- Процессор: Intel i3 или выше
- ОЗУ: от 8 ГБ

- Диск: от 20 ГБ свободного места
- ОС: Windows 7 64-bit и выше
- Сеть: от 1 Гбит

Для рабочего места (без сервиса):

- Процессор: от 2 ядер
 - ОЗУ: от 2 ГБ
 - Диск: 0.5 ГБ
 - ОС: Windows 7 и выше
 - Сеть: от 100 Мбит или VPN
 - Разрешение экрана: от 1280×1024
-

Дополнительно

- Файл настроек — `cnf.db`, его можно использовать для переноса настроек.
 - Нельзя просто копировать папку `fx` — используйте **только установщик**.
 - Инструкции доступны прямо в программе — ищите по кнопкам типа "**Инструкция**" (например, в "Журнал Накладных").
-

Если не уверены — спросите поддержку support@infoas.biz. Удачной установки!